

应用灵活！



# BRAND *plates*® – ELISA应用

H I G H - T E C H   D I S P O S A B L E S

ELISA反应获得高度特异性和选择性的一个关键因素在于抗原或抗体是否与微孔板表面有效结合。

BRAND *plates*® 微孔板有极佳的光学特性，并参照 ANSI 和 SBS 标准生产。BRAND提供 immunoGrade™ 和 pureGrade™ 两种表面类型的96孔标准及联排板 - 带给您更大的灵活性及最佳的实验结果。

#### ■ immunoGrade™


高结合力（高吸附），对IgG，以及同时含有亲水性和疏水性区域的分子提供最佳结合力

#### ■ pureGrade™

中结合力（中吸附），在某种程度上较immunoGrade™ 更加疏水



# 技术参数

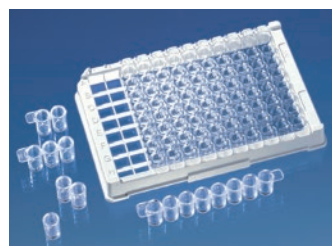

## 标准板

适用于多种应用的标准板。适用于整板都需要进行测试的常规试验。BRAND标准板有四种板底类型（F型，C型，V型和U型）。另有底透或非底透的黑/白色微孔板可选。

## 联排板

使用高度灵活。只需选用必要的孔数。两种规格可选：

外框无网格：

12排，每排各8孔。可将每排联排孔移出并再次插入框架内。联排孔不可再拆分。

外框有网格：

12排，每排各8孔。可将每排联排孔移出并再次插入框架内。联排孔可以拆分成8个独立小孔，每个小孔也可以单独插入到有网格的板子内。

## immunoGrade™

PS材质，未灭菌。  
针对IgG固定优化，适用于标准ELISA反应。

### 96孔微孔板

包装规格：100板（5板/叠，20叠）  
包装规格：100板（25板/包，4包）\*

颜色	板底类型	每孔容量	货号
<b>96孔标准微孔板</b>			
透明	U形底	330 µl	<b>7817 20</b>
透明	V形底	360 µl	<b>7817 21</b>
透明	F形底	350 µl	<b>7817 22</b>
透明	C形底	350 µl	<b>7817 23</b>
白色	U形底	330 µl	<b>7817 24</b>
白色	C形底	350 µl	<b>7817 26</b>
黑色	U形底	330 µl	<b>7817 27</b>
黑色	C形底	350 µl	<b>7817 29</b>
<b>96孔微孔板，底透</b>			
黑色	F形底	330 µl	<b>7817 31*</b>
<b>96孔联排板，无网格</b>			
透明	F形底	360 µl	<b>7823 05*</b>
<b>96孔联排板，有网格</b>			
透明	F形底	350 µl	<b>7823 06*</b>

## pureGrade™

PS材质，未经表面处理，未灭菌。  
适用于均相测试、筛选及储存等。

### 96孔微孔板

包装规格：100板（5板/叠，20叠）  
包装规格：100板（25板/包，4包）\*

颜色	板底类型	每孔容量	货号
<b>96孔标准微孔板</b>			
透明	U形底	330 µl	<b>7816 00</b>
透明	V形底	360 µl	<b>7816 01</b>
透明	F形底	350 µl	<b>7816 02</b>
透明	C形底	350 µl	<b>7816 03</b>
白色	U形底	330 µl	<b>7816 04</b>
白色	F形底	350 µl	<b>7816 05</b>
黑色	U形底	330 µl	<b>7816 07</b>
黑色	F形底	350 µl	<b>7816 08</b>
<b>96孔微孔板，底透</b>			
白色	F形底	330 µl	<b>7816 10*</b>
黑色	F形底	330 µl	<b>7816 11*</b>
<b>96孔联排板，无网格</b>			
透明	F形底	360 µl	<b>7823 00*</b>
<b>96孔联排板，有网格</b>			
透明	F形底	350 µl	<b>7823 01*</b>

有关BRANDplates® 微孔板的更多信息请登录[www.brand.de](http://www.brand.de) 或查看BRAND总目录。

BRAND® 与BRANDplates® 为德国BRAND GMBH + CO KG的商标。其他商标为相应拥有者的财产。

我们的技术文档意为通知与建议我们的客户。当然，许多经验值的实现与在特定测试条件下获得的结果，在实际应用时可能由于不同的因素而超出我们的控制范围。因此，请原谅我们不能承担由我们的建议衍生的要求。使用者有责任确定产品是否符合所需进行的特定应用。

涉及技术信息修改恕不另行通知。可能包含错误。

普兰德（上海）贸易有限公司

地址：上海市徐汇区斜土路2899甲号光启文化广场B栋506室

电话：+86 21 6422 2318 · 传真：+86 21 6422 2268

普兰德公司网址：[www.brand.cn.com](http://www.brand.cn.com) · 电子邮件地址：[info@brand.cn.com](mailto:info@brand.cn.com)

BRAND GMBH + CO KG · P.O. Box 11 55 · 97861 Wertheim · Germany

Tel.: +49 9342 808-0 · Fax: +49 9342 808-98000 · E-Mail: [info@brand.de](mailto:info@brand.de) · Internet: [www.brand.de](http://www.brand.de)

