

¡Más seguridad para muestras valiosas!



Microtubos con cierre de tapa

F I R S T C L A S S · B R A N D

Los nuevos microtubos de 0,5 ml, 1,5 ml y 2,0 ml cuentan con un cierre de tapa adicional, para así lograr una hermeticidad perfecta y evitar la abertura accidental de la misma.

- Esterilizable en autoclave a 121 °C y 2 bar (DIN EN 285)
- Puede centrifugarse hasta 30.000 g
- No contiene RNasa, DNasa, ADN ni endotoxinas




Detalles técnicos

Gancho del cierre de tapa



El cierre de tapa de los nuevos microtubos de BRAND protege contra una abertura accidental de la tapa.

Borde más ancho de la tapa

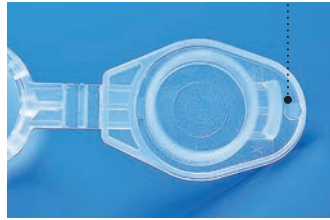

El borde ancho de la tapa permite la manipulación con solo una mano.


- Fabricado bajo condiciones de sala blanca según ISO 14 644-1, clase 8
- Fabricado con polipropileno de alta calidad grado medicinal

- Subdivisiones de volúmenes diferentes
- Superficies para escritura con acabado mate en la tapa y en el tubo

Durante la desnaturalización de las muestras en agua hirviendo y al someterlos a esfuerzos generales y térmicos, los microtubos están expuestos a altas cargas.

El gráfico al costado indica las fuerzas necesarias para la abertura de la tapa en Newton (N).

Fuerza de abertura de la tapa

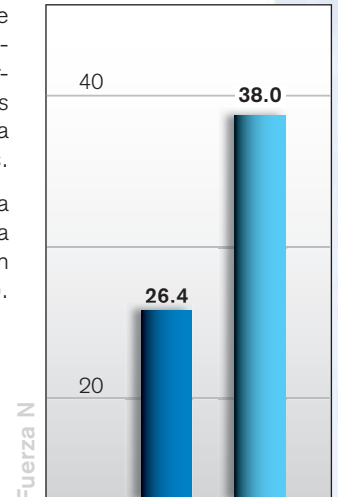

- Microtubos BRAND con cierre de tapa
- Microtubos estándar

Referencias

Microtubos para los más diversos requerimientos



Microtubos con cierre de tapa

Protección contra abertura accidental de la tapa.

Volumen ml	cantidad	ref.
0,5	500	7805 36
1,5	1000	7805 40
2,0	500	7805 46

Microtubos, sin cierre de tapa

Descripción / requerimientos especiales	ref.
0,5 ml, para muestras estándar (1000 unidades)	7805 07
1,5 ml, para muestras estándar (500 unidades)	7805 00
1,5 ml, para trabajos de alto rendimiento (6 x 500 unidades)	7805 02
1,5 ml, para trabajos con reactivos sensibles a la luz, colores ámbar*	7805 25
1,5 ml, para la asignación rápida de diversas muestras, amarillo*	7805 21
1,5 ml, para la asignación rápida de diversas muestras, azul*	7805 22
1,5 ml, para la asignación rápida de diversas muestras, verde*	7805 23
1,5 ml, para la asignación rápida de diversas muestras, anaranjado*	7805 24
1,5 ml, para aplicaciones sensibles, microtubos BIO-CERT® libres de endotoxinas, ADN, RNasa y ATP estériles (450 unidades)	7804 00
2,0 ml, para muestras estándar (500 unidades)	7805 50
sin tapa	
1,5 ml, para trabajar de forma rápida (6 x 2000 unidades)	7805 05

* (500 unidades)

Encontrará más informaciones sobre productos Life Science de BRAND® en www.brand.de

BRAND® es una marca de BRAND GMBH + CO KG, Alemania.

Mediante nuestros documentos técnicos, pretendemos informar y asesorar a nuestros clientes. No obstante, la transferibilidad de los valores empíricos y resultados generales bajo condiciones de test en el caso concreto de aplicación dependerá de diversos factores que no podemos incluir. Por ello, rogamos comprendan que no se puede derivar exigencia alguna de nuestro asesoramiento. Por tanto, deberá comprobar por sí mismo la transferibilidad con gran minuciosidad.

Reservado errores y el derecho de realizar modificaciones técnicas.

BRAND GMBH + CO KG · P.O. Box 11 55 · 97861 Wertheim · Germany
Tel.: +49 9342 808-0 · Fax: +49 9342 808-98000 · E-Mail: info@brand.de · Internet: www.brand.de

